



VACUSERA

ÜRÜN KATALOĐU

disera
RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS



İÇİNDEKİLER

Hakkımızda	4
Üretim	5
VACUSERA Kan Alma Sistemleri	6
VACUSERA Kan Alma Sistemi Ürün Açıklamaları ve Etiketleme Sembolleri	7
VACUSERA Kan Alma Tüpleri	8 - 9
VACUSERA Serum Tüpleri	10
VACUSERA Serum Jelli ve Trombinli Serum Jelli	11
VACUSERA K2Edta'lı Tüpler	12
VACUSERA K3Edta'lı Tüpler	13
VACUSERA Koagülasyon Tüpleri	14
VACUSERA CTAD Tüpleri	15
VACUSERA Lityum Heparinli Tüpler	16
VACUSERA Sodyum Heparinli Tüpler	17
VACUSERA Katkısız Tüpler	18
VACUSERA Kan Gruplama Tüpleri	19
VACUSERA Eser Element Tüpleri	20
VACUSERA Crossmatch Tüpleri	21
VACUSERA Glikoz Tüpleri	22
VACUSERA Kan Alma İğneleri	23
VACUSERA Kan Alma Aksesuarları	24 - 25
VACUSERA Mini Kapiller Kan Alma Sistemleri	26 - 27
VACUSERA Sedimentasyon Sistemi	28
VACUSERA İdrar Toplama Sistemleri	29
VACUSERA Bilgilendirme	30 - 31



1996 YILINDA İZMİR'DE KURULAN DİSERA, 2003 YILINDAN SONRA GEREK SATIŞ FAALİYETLERİ GEREKSE ÜRETİM FAALİYETLERİNE HIZ VERMİŞTİR.

Üretim faaliyetinin ilk yatırımını 2004 yılında başlamış olup ürün portföyü, idrar bardağı, atık kabı, vajinal spekulum, petri kaplarını içermektedir. 2014 yılında tamamlanan vakumlu kan alma tüp üretimi için yapılan yatırım ile üretim faaliyetimiz aynı ivme kazanmıştır. Vacusera vakumlu kan alma tüpleri, diagnostik alanındaki tecrübemiz ile üretim teknolojimizin birikiminin en son ürünü olarak piyasaya sunulmaktadır.

2014 yılının başından itibaren Tire Organize Sanayi Bölgesindeki yeni fabrikamızda üretim devam etmekte olup, ürünlerimizin hepsi CE işaretine sahiptir ve üretimimizin tamamı ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

MİSYONUMUZ

Kaliteli, tıbbi cihaz yönetmeliği ilkelerine uygun ve çevre dostu ürünler üretmek.

Markamıza bağlı müşteriler yaratmak.

Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına hizmet edecek gerekli ekipmanı temin etmek.

VİZYONUMUZ

Pazar payı en yüksek ve alanında en çeşitli ürün yelpazesi sunan tıbbi cihaz üreticisi olmak.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Sürekli yeniliklerin takibi ve müşteriye uygun ürünlerin sunulması



ÜRETİM

Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş., medikal sektöründe kaliteli ve teknik ürünler sağlamak konusundaki bilgi birikimini ve tecrübesini, sağlık sektörünün ihtiyaçlarıyla birleştirerek yenilikçi ürün çözümleri ile üretim faaliyetlerini ISO 13485:2016 kalite standardı doğrultusunda sunmaktadır.

Vacusera Vakumlu Kan Alma Tüpleri 98/79/EC In Vitro Diagnostic direktifleri doğrultusunda CE işaretine sahiptir.

Vacusera Vakumlu Kan Alma Tüpleri ISO 6710 standartlarına göre üretilmektedir.

Vacusera Vakumlu Kan Alma İğneleri 93/42/EEC Tıbbi Cihaz direktifleri doğrultusunda üretilmekte olup, CE belgesine sahiptir.

Sürekli yenilenen teknoloji ve tecrübeli personel altyapısı ile tutarlı bir kalite güvenliği ve ayrıca farklı ulusal ve uluslararası talimatlara göre şekillenen üretim normları DİSERA ürünlerinin yüksek kalite seviyesini sağlamaktadır.

VACUSERA KAN ALMA SİSTEMLERİ

Diagnostik laboratuvarlarındaki hızlı otomasyon gelişmesi, yüksek standartlar kan alma sistemlerinin de sürekli bir performansa sahip olmasını gerektirir. Vacusera Kan Alma Sistemleri ile Vacusera Kan Alma İğneleri ve Aksesuarları kan alma prosedürlerinin gerekliliğini yerine getirmek, hasta konforu ve kullanıcı güvenliğini sağlayabilmek için tasarlanmıştır.

Vacusera Kan Alma Tüpleri kırılmaz PET tüp, butil kauçuk ve polietilen kapaktan oluşmaktadır. Hem medikal kağıt etiketli hemde şeffaf etiketli tüplerimizi kullanıcılara sunmaktayız.





Vacusera Kan Alma Sistemleri'nin tüm parçaları hastaların konforunun artırılması, kaliteli ve güvenli kan alınması ve de güvenilir test sonuçları için üretilmiştir.





NO	VACUSERA KAN ALMA SİSTEMİ ÜRÜN AÇIKLAMALARI	HARF KODU	İÇERİK
1	Vacusera Kan Alma Tüpü	K2E	EDTA Dipotasyum Tuzu
2	Güvenlikli Kapak	K3E	EDTA Tripotasyum Tuzu
3	Vacusera Güvenlikli Holder	9NC	Trisodyum Sitrat 9:1
4	Vacusera Kan Alma İğnesi	4NC	Trisodyum Sitrat 4:1
5	Vacusera Güvenlikli Kelebek Set	FE	Sodyum Fluorid / EDTA
6	Vacusera Luer Adaptör	FX	Sodyum Fluorid /Potasyum Oksalat
		LH	Lityum Heparin
		NH	Sodyum Heparin
		Z	Katkısız /Pıhtı Aktivatörü
		CTAD	Tamponlanmış Sitrat 0.109 M
		ACD-A	ACD Solüsyon A
		ACD-B	ACD Solüsyon B
		TBT	Trombin Bazlı Tüp

VACUSERA KAN ALMA ETİKETLEME SEMBOLLERİ

	Tek kullanımlık		Etilen oksit sterilizasyon
	Son kullanma tarihi		Radyasyon sterilizasyon
	Lot numarası		CE işareti
	Referans Numarası		In vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz
	Üretim tarihi		Kullanım talimatlarına başvurun
	Üretici		Sıcaklık limiti
	Güneşten koruyunuz		Latex içermez
	Ambalajı zarar görmüş ürünü kullanmayınız.		Steril edilemez



VACUSERA KAN ALMA TÜPLERİ

Vacusera Kan Alma Tüpleri kırılmaz PET tüp, butil kauçuk ve polietilen kapaktan oluşmaktadır. Medikal kağıt etiketli; şeffaf etiketli ve barkod etiketli tüplerimizi kullanıcılara sunmaktayız.

Vacusera Kan Alma Sistemleri'nin tüm parçaları hastaların konforunun artırılması, kaliteli ve güvenli kan alınması ve de güvenilir test sonuçları için üretilmiştir.

KAĞIT ETİKETLİ TÜPLER



ŞEFFAF ETİKETLİ TÜPLER



BARKOD ETİKETLİ TÜPLER





VACUSERA SERUM TÜPLERİ

Vacusera Serum Tüpleri klinik biyokimya ve immünoloji laboratuvarlarında uygulanan testlerde kullanılır. Tüpün içerisine sıvanan özel aktivatörü sayesinde pıhtılaşma sağlanır.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234201	VACUSERA 1 ml Serum	1	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234202	VACUSERA 2 ml Serum	2	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234203	VACUSERA 3 ml Serum	3	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234204	VACUSERA 4 ml Serum	4	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235206	VACUSERA 6 ml Serum	6	13 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236209	VACUSERA 9 ml Serum	9	16 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236200	VACUSERA 10 ml Serum	10	16 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434201	VACUSERA 1 ml Serum	1	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434202	VACUSERA 2 ml Serum	2	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434203	VACUSERA 3 ml Serum	3	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434204	VACUSERA 4 ml Serum	4	13 x 75	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435206	VACUSERA 6 ml Serum	6	13 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436209	VACUSERA 9 ml Serum	9	16 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436200	VACUSERA 10 ml Serum	10	16 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA SERUM TÜPLERİ JELLİ

Vacusera Serum Tüpleri içerisinde yer alan jelli tüplerdeki inert jel, santrifüj esnasında serum ve kan hücreleri arasına girerek bariyer oluşturur. Bu sayede kaliteli serum elde etmenizi sağlar.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234302	VACUSERA 2 ml Serum JEL	2	13 x 75	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234304	VACUSERA 2,5 ml Serum JEL	2,5	13 x 75	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234303	VACUSERA 3.5 ml Serum JEL	3.5	13 x 75	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235305	VACUSERA 5 ml Serum JEL	5	13 x 100	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236308	VACUSERA 8 ml Serum JEL	8	16 x 100	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434302	VACUSERA 2 ml Serum JEL	2	13 x 75	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434304	VACUSERA 2.5 ml Serum JEL	2.5	13 x 75	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434303	VACUSERA 3.5 ml Serum JEL	3.5	13 x 75	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435305	VACUSERA 5 ml Serum JEL	5	13 x 100	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436308	VACUSERA 8 ml Serum JEL	8	16 x 100	JEL + Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●

VACUSERA TROMBINLİ SERUM TÜPLERİ JELLİ

Vacusera Trombinli Serum Tüpleri içinde bulunan trombin bazlı pıhtı aktivatörü ile hızlı pıhtılaşma sağlar. Tüp içerisindeki inert jel ile birlikte hızlı serum ayrılmasına olanak sağlar.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
235315	VACUSERA 5 ml Serum JEL+ Trombin	5	13 x 100	JEL + Pıhtı Aktivatörü+ Trombin	12 Ay	KAĞIT	100/1200	●
435315	VACUSERA 5 ml Serum JEL+ Trombin	5	13 x 100	JEL + Pıhtı Aktivatörü+ Trombin	12 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA K2EDTA'LI TÜPLER

Vacusera EDTA'lı Tüpler hematoloji testlerinde kullanılır. K2EDTA ve K2EDTA JELLİ olarak iki farklı gruba ayrılarak ihtiyaca göre karşılık vermektedir.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234601	VACUSERA 1 ml K2EDTA	1	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234602	VACUSERA 2 ml K2EDTA	2	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234603	VACUSERA 3 ml K2EDTA	3	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234604	VACUSERA 4 ml K2EDTA	4	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234605	VACUSERA 4.5 ml K2EDTA	4.5	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235606	VACUSERA 6 ml K2EDTA	6	13 x 100	K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236609	VACUSERA 9 ml K2EDTA	9	16 x 100	K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434601	VACUSERA 1 ml K2EDTA	1	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434602	VACUSERA 2 ml K2EDTA	2	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434603	VACUSERA 3 ml K2EDTA	3	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434604	VACUSERA 4 ml K2EDTA	4	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434605	VACUSERA 4.5 ml K2EDTA	4.5	13 x 75	K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435606	VACUSERA 6 ml K2EDTA	6	13 x 100	K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436609	VACUSERA 9 ml K2EDTA	9	16 x 100	K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
234623	VACUSERA 3 ml K2EDTA + JEL	3	13 x 75	JEL + K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235625	VACUSERA 5 ml K2EDTA + JEL	5	13 x 100	JEL + K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236628	VACUSERA 8 ml K2EDTA + JEL	8	16 x 100	JEL + K2E K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434623	VACUSERA 3 ml K2EDTA + JEL	3	13 x 75	JEL + K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435625	VACUSERA 5 ml K2EDTA + JEL	5	13 x 100	JEL + K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436628	VACUSERA 8 ml K2EDTA + JEL	8	16 x 100	JEL + K2E K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA K3EDTA'LI TÜPLER

Vacusera EDTA'lı Tüpler hematoloji testlerinde kullanılır. K3EDTA çeşitleri ihtiyaca göre karşılık vermektedir.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234611	VACUSERA 1 ml K3EDTA	1	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234612	VACUSERA 2 ml K3EDTA	2	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234613	VACUSERA 3 ml K3EDTA	3	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234614	VACUSERA 4 ml K3EDTA	4	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234615	VACUSERA 4.5 ml K3EDTA	4.5	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235616	VACUSERA 6 ml K3EDTA	6	13 x 100	K3E K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236619	VACUSERA 9 ml K3EDTA	9	16 x 100	K3E K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434611	VACUSERA 1 ml K3EDTA	1	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434612	VACUSERA 2 ml K3EDTA	2	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434613	VACUSERA 3 ml K3EDTA	3	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434614	VACUSERA 4 ml K3EDTA	4	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434615	VACUSERA 4.5 ml K3EDTA	4.5	13 x 75	K3E K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435616	VACUSERA 6 ml K3EDTA	6	13 x 100	K3E K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436619	VACUSERA 9 ml K3EDTA	9	16 x 100	K3E K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA KOAGÜLASYON TÜPLERİ

Vacusera Koagülasyon Tüpleri kan pıhtılaşma testleri için kullanılır. 0.109 mol/l (%3.2) ve 0.129 mol/l (%3.8) olarak farklı değerlerde tamponlanmış sodyum sitrat çözeltisi ile beraber çift tüp teknolojisiyle Koagülasyon test sonuçları için gerekli koşulları sağlar.

VACUSERA 9NC KOAGÜLASYON SODYUM SİTRAT %3.2

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/ Koli	Kapak Rengi
234501	VACUSERA 1 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat - çift tüp	1	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234502	VACUSERA 1.8 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat - çift tüp	1.8	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234503	VACUSERA 2.7 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat - çift tüp	2.7	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234504	VACUSERA 3,6 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat	3,6	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234505	VACUSERA 4,5 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat	4,5	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434501	VACUSERA 1 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat - çift tüp	1	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434502	VACUSERA 1.8 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat - çift tüp	1.8	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434503	VACUSERA 2.7 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat - çift tüp	2.7	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434504	VACUSERA 3,6 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat	3,6	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434505	VACUSERA 4,5 ml Koagülasyon %3.2 Sodyum Sitrat	4,5	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.2(0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●

VACUSERA 9NC KOAGÜLASYON SODYUM SİTRAT %3.8

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/ Koli	Kapak Rengi
234511	VACUSERA 1 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat - çift tüp	1	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234512	VACUSERA 1.8 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat - çift tüp	1.8	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234513	VACUSERA 2.7 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat - çift tüp	2.7	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234514	VACUSERA 3,6 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat	3,6	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234515	VACUSERA 4,5 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat	4,5	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434511	VACUSERA 1.8 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat - çift tüp	1	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434512	VACUSERA 1.8 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat - çift tüp	1.8	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434513	VACUSERA 2.7 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat - çift tüp	2.7	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434514	VACUSERA 3,6 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat	3,6	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434515	VACUSERA 4,5 ml Koagülasyon %3.8 Sodyum Sitrat	4,5	13 x 75	9NC Sodyum Sitrat %3.8(0.129M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA CTAD TÜPLERİ

Vacusera CTAD tüpleri, içerdiği Teofilin, Adenozin ve Dipiridamol ile tamponlanmış sitrat çözeltisi sayesinde invitro trombosit aktivasyonu önüne geçerek Heparin terapisi alan hasta gruplarında doğru koagülasyon test sonuçları elde etmek için kullanılmaktadır.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234522	Vacusera 1.8 ml CTAD	1.8	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234523	Vacusera 2.7 ml CTAD	2.7	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234524	Vacusera 3.6 ml CTAD	3.6	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234525	Vacusera 4.5 ml CTAD	4.5	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434522	Vacusera 1.8 ml CTAD	1.8	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434523	Vacusera 2.7 ml CTAD	2.7	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434524	Vacusera 3.6 ml CTAD	3.6	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434525	Vacusera 4.5 ml CTAD	4.5	13 x 75	Tamponlanmış Sodyum Sitrat %3.2 (0.109M)	9 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA HEPARİNLİ TÜPLER

Vacusera Heparinli Tüpler'de Lityum Heparin ve Sodyum Heparin olarak iki farklı içerik bulunmaktadır. Heparin sayesinde kanın pıhtılaşması önlenir ve plazma elde edilmesi sağlanır. Rutin biyokimya ile beraber acil biyokimyada da kullanılır. Bu ürün grubunda yer alan Lityum Heparin + Jelli tüplerde santrifüj esnasında jel plazma ve kan hücreleri arasına girerek kaliteli bir plazma elde etmenizi sağlar.

VACUSERA LH LİTYUM HEPARİN

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234402	VACUSERA 2 ml Li-Heparin	2	13 x 75	LH/Lityum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234404	VACUSERA 4 ml Li-Heparin	4	13 x 75	LH/Lityum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235406	VACUSERA 6 ml Li-Heparin	6	13 x 100	LH/Lityum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236409	VACUSERA 9 ml Li-Heparin	9	16 x 100	LH/Lityum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434402	VACUSERA 2 ml Li-Heparin	2	13 x 75	LH/Lityum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434404	VACUSERA 4 ml Li-Heparin	4	13 x 75	LH/Lityum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435406	VACUSERA 6 ml Li-Heparin	6	13 x 100	LH/Lityum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436409	VACUSERA 9 ml Li-Heparin	9	16 x 100	LH/Lityum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
234413	VACUSERA 3 ml Li-Heparin + JEL	3	13 x 75	JEL + LH/Lityum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235415	VACUSERA 5 ml Li-Heparin + JEL	5	13 x 100	JEL + LH/Lityum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236418	VACUSERA 8 ml Li-Heparin + JEL	8	16 x 100	JEL + LH/Lityum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434413	VACUSERA 3 ml Li-Heparin + JEL	3	13 x 75	JEL + LH/Lityum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435415	VACUSERA 5 ml Li-Heparin + JEL	5	13 x 100	JEL + LH/Lityum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436418	VACUSERA 8 ml Li-Heparin + JEL	8	16 x 100	JEL + LH/Lityum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA HEPARİNLİ TÜPLER

Vacusera Sodyum Heparin Tüpleri'ndeki heparin sayesinde kanın pıhtılaşması önlenir ve plazma elde edilmesi sağlanır. Rutin biyokimya ile beraber acil biyokimyada da kullanılır.

VACUSERA NH SODYUM HEPARİN

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234424	VACUSERA 4 ml Sodyum Heparin	4	13 x 75	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235426	VACUSERA 6 ml Sodyum Heparin	6	13 x 100	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236429	VACUSERA 9 ml Sodyum Heparin	9	16 x 100	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434424	VACUSERA 4 ml Sodyum Heparin	4	13 x 75	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435426	VACUSERA 6 ml Sodyum Heparin	6	13 x 100	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436429	VACUSERA 9 ml Sodyum Heparin	9	16 x 100	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
234433	VACUSERA 3 ml Sodyum Heparin + JEL	3	13 x 75	JEL + Sodyum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235435	VACUSERA 5 ml Sodyum Heparin + JEL	5	13 x 100	JEL + Sodyum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236438	VACUSERA 8 ml Sodyum Heparin + JEL	8	16 x 100	JEL + Sodyum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434433	VACUSERA 3 ml Sodyum Heparin + JEL	3	13 x 75	JEL + Sodyum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435435	VACUSERA 5 ml Sodyum Heparin + JEL	5	13 x 100	JEL + Sodyum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436438	VACUSERA 8 ml Sodyum Heparin + JEL	8	16 x 100	JEL + Sodyum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA KATKISIZ TÜPLER

Vacusera Katkısız Tüpler'de hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234102	VACUSERA 2 ml Katkısız	2	13 x 75	Katkısız	18 Ay	KAĞIT	100/1200	○
234104	VACUSERA 4 ml Katkısız	4	13 x 75	Katkısız	18 Ay	KAĞIT	100/1200	○
235106	VACUSERA 6 ml Katkısız	6	13 x 100	Katkısız	18 Ay	KAĞIT	100/1200	○
236109	VACUSERA 9 ml Katkısız	9	16 x 100	Katkısız	18 Ay	KAĞIT	100/1200	○
236100	VACUSERA 10 ml Katkısız	10	16 x 100	Katkısız	18 Ay	KAĞIT	100/1200	○
434102	VACUSERA 2 ml Katkısız	2	13 x 75	Katkısız	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	○
434104	VACUSERA 4 ml Katkısız	4	13 x 75	Katkısız	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	○
435106	VACUSERA 6 ml Katkısız	6	13 x 100	Katkısız	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	○
436109	VACUSERA 9 ml Katkısız	9	16 x 100	Katkısız	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	○
436100	VACUSERA 10 ml Katkısız	10	16 x 100	Katkısız	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	○



VACUSERA KAN GRUPLAMA TÜPLERİ

Vacusera Kan Grublama Tüpleri; ACD-A veya ACD-B olarak 2 farklı formülasyon seçeneği ile kullanılmaktadır.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
235726	VACUSERA 6 ML ACD-A	6	13 x 100	ACD-A	12 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236729	VACUSERA 9 ML ACD-A	9	16 x 100	ACD-A	12 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235736	VACUSERA 6 ML ACD-B	6	13 x 100	ACD-B	12 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236739	VACUSERA 9 ML ACD-B	9	16 x 100	ACD-B	12 Ay	KAĞIT	100/1200	●
435726	VACUSERA 6 ML ACD-A	6	13 x 100	ACD-A	12 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436729	VACUSERA 9 ML ACD-A	9	16 x 100	ACD-A	12 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435736	VACUSERA 6 ML ACD-B	6	13 x 100	ACD-B	12 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436739	VACUSERA 9 ML ACD-B	9	16 x 100	ACD-B	12 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA ESER ELEMENT TÜPLERİ

Vacusera Eser Element Tüpleri ; Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Cıva (Hg), Kurşun (Pb) gibi eser elementlerin tayininde kullanılmaktadır. Pıhtı Aktivatörü, ya da K2EDTA ya da Sodyum Heparin içermektedir.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
235006	VACUSERA 6 ml Serum Eser Element	6	13 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235016	VACUSERA 6 ml NH Eser Element	6	13 x 100	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235026	VACUSERA 6 ml K2EDTA Eser Element	6	13 x 100	K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
435006	VACUSERA 6 ml Serum Eser Element	6	13 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435016	VACUSERA 6 ml NH Eser Element	6	13 x 100	NH/Sodyum Heparin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435026	VACUSERA 6 ml K2EDTA Eser Element	6	13 x 100	K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA CROSSMATCH TÜPLERİ

Vacusera Crossmatch tüpleri; Pıhtı Aktivatörü olarak silika, Antikoagülan olarak K2EDTA veya K3EDTA içermektedir.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
235216	VACUSERA 6 ml Crossmatch	6	13 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236219	VACUSERA 9 ml Crossmatch	9	16 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234634	VACUSERA 4 ml Crossmatch	4	13 x 75	K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235636	VACUSERA 6 ml Crossmatch	6	13 x 100	K2EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234644	VACUSERA 4 ml Crossmatch	4	13 x 75	K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235646	VACUSERA 6 ml Crossmatch	6	13 x 100	K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
435216	VACUSERA 6 ml Crossmatch	6	13 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436219	VACUSERA 9 ml Crossmatch	9	16 x 100	Pıhtı Aktivatörü	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434634	VACUSERA 4 ml Crossmatch	4	13 x 75	K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435636	VACUSERA 6 ml Crossmatch	6	13 x 100	K2EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434644	VACUSERA 4 ml Crossmatch	4	13 x 75	K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435646	VACUSERA 6 ml Crossmatch	6	13 x 100	K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA GLİKOZ TÜPLERİ

Vacusera Glikoz Tüpleri ; Sodyum Florid ve K3EDTA , veya Sodyum Florid ve Potasyum Oksalat içermektedir. Kan şekeri, anti-alkali hemoglobün, şeker toleransı ve etanol gibi testlerde kullanılır.

VACUSERA FE/SODYUM FLORİD + K3EDTA

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234702	Vacusera 2 ml FE/Sodyum Florid+K3EDTA	2	13 x 75	FE/Sodyum Florid +K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234704	Vacusera 4 ml FE/Sodyum Florid+K3EDTA	4	13 x 75	FE/Sodyum Florid +K3EDTA	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434702	Vacusera 2 ml FE/Sodyum Florid+K3EDTA	2	13 x 75	FE/Sodyum Florid +K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434704	Vacusera 4 ml FE/Sodyum Florid+K3EDTA	4	13 x 75	FE/Sodyum Florid +K3EDTA	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●

VACUSERA FX/SODYUM FLORİD + POTASYUM OKSALAT

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
234712	Vacusera 2 ml FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	2	13 x 75	FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
234714	Vacusera 4 ml FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	4	13 x 75	FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
434712	Vacusera 2 ml FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	2	13 x 75	FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
434714	Vacusera 4 ml FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	4	13 x 75	FX/Sodyum Florid + Potasyum Oksalat	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●



VACUSERA KAN ALMA İĞNELERİ

Vacusera Kan Alma İğneleri silikon kaplı olması sebebiyle sürtünmeyi azaltarak nazik bir şekilde damara girişi sağlar. 18 G pembe, 20 G sarı, 21 G yeşil, 22 G siyah ve 23 G mavi olmak üzere beş farklı çeşit bulunmaktadır.

Bununla beraber zor damarlardan kan alınmasında kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan 20 G, 21 G, 22 G ve 23 G pencereleli iğne bulunmaktadır. Pencere sayesinde kullanıcı iğnenin damarda olup olmadığını görsel olarak anlayarak kan alma işlemini güvenle gerçekleştirir.

Ref No	Açıklama	Ebat	Paket / Koli	Renk
250018K	Kan Alma İğnesi 18 G	18 G x 1 1/2" (1.2x38mm)	100/5000	●
250020K	Kan Alma İğnesi 20 G	20 G x 1 1/2" (0.9x38mm)	100/5000	●
250021K	Kan Alma İğnesi 21 G	21 G x 1 1/2" (0.8x38mm)	100/5000	●
250022K	Kan Alma İğnesi 22 G	22 G x 1 1/2" (0.7x38mm)	100/5000	●
250023K	Kan Alma İğnesi 23 G	23 G x 1 1/2" (0.6x38mm)	100/5000	●
252020K	Luer Adaptör 20 G	20 G	100/5000	●
255020K	Kan Alma İğnesi 20 G - VISION	20 G x 1 1/2" (0.9x38mm)	100/5000	●
255021K	Kan Alma İğnesi 21 G - VISION	21 G x 1 1/2" (0.8x38mm)	100/5000	●
255022K	Kan Alma İğnesi 22 G - VISION	22 G x 1 1/2" (0.7x38mm)	100/5000	●
255023K	Kan Alma İğnesi 23 G - VISION	23 G x 1 1/2" (0.6x38mm)	100/5000	●



AKSESUARLAR

Vacusera Aksesuar Ürünleri, kan alma işleminde ihtiyaç duyduğunuz diğer ürünler ile beraber kullanıcıyı destekleyerek tüm gereksinimleri üst seviyede sağlar.

VACUSERA TIBBİ ATIK KUTUSU

Tıbbi Atık Kutuları 2.1 lt. ve 7.5 lt. olarak iki farklı seçenekte sunulmaktadır. Kan alma iğnelerinin, bistürilerin, şırıngaların, kanüllerin ve diğer kesici ve delici ürünlerin atılması içindir. Kolay taşıma kolaylığı ve kilitli kapak sayesinde kullanımı güvenli ve rahattır.



Ref No	Açıklama	Adet / Kutu
101175	Tıbbi Atık Kutusu 7.5 lt.	40 adet / kutu
101121	Tıbbi Atık Kutusu 2.1 lt.	100 adet / kutu

VACUSERA TURNİKE

Vacusera Turnike sayesinde seçilen bölge rahatça bağlanır. Kullanımı güvenli ve rahattır.



Ref No	Açıklama	Paket / Koli
259001	Otomatik Turnike	500 adet / kutu
259001-1	Otomatik Turnike Pediatrik - Yeşil	500 adet / kutu
259001-2	Otomatik Turnike Pediatrik - Pembe	500 adet / kutu
259050	Tek Kullanımlık Turnike	50 adet / kutu

VACUSERA GÜVENLİKLİ KELEBEK SET

Vacusera Güvenlikli Kelebek Set deforme olmuş deri yüzeylerinden, ince ve zor damarlardan kan alımı için kullanıcıya büyük konfor sağlar. Güvenlikli olması sebebiyle sağlık çalışanlarını iğne batma riskine karşı maksimum korur.



Ref No	Açıklama	Ebat (mm)	Paket / Koli	Renk
24121190K	Güvenlikli Kelebek Set 21 G 3/4" x 7"	0.8 x 19mm x 180mm	100/2000	●
24121300K	Güvenlikli Kelebek Set 21 G 3/4" x 12"	0.8 x 19mm x 305mm	100/2000	●
24122190K	Güvenlikli Kelebek Set 22 G 3/4" x 7"	0.7 x 19mm x 180mm	100/2000	●
24122300K	Güvenlikli Kelebek Set 22 G 3/4" x 12"	0.7 x 19mm x 305mm	100/2000	●
24123190K	Güvenlikli Kelebek Set 23 G 3/4" x 7"	0.6 x 19mm x 180mm	100/2000	●
24123300K	Güvenlikli Kelebek Set 23 G 3/4" x 12"	0.6 x 19mm x 305mm	100/2000	●
24125190K	Güvenlikli Kelebek Set 25 G 3/4" x 7"	0.5 x 19mm x 180mm	100/2000	●
24125300K	Güvenlikli Kelebek Set 25 G 3/4" x 12"	0.5 x 19mm x 305mm	100/2000	●

VACUSERA GÜVENLİKLİ KELEBEK SET + HOLDER



Ref No	Açıklama	Ebat (mm)	Paket / Koli	Renk
24221190K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 21 G 3/4" x 7"	0.8 x 19mm x 180mm	25/500	●
24221300K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 21 G 3/4" x 12"	0.8 x 19mm x 305mm	25/500	●
24222190K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 22 G 3/4" x 7"	0.7 x 19mm x 180mm	25/500	●
24222300K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 22 G 3/4" x 12"	0.7 x 19mm x 305mm	25/500	●
24223190K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 23 G 3/4" x 7"	0.6 x 19mm x 180mm	25/500	●
24223300K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 23 G 3/4" x 12"	0.6 x 19mm x 305mm	25/500	●
24225190K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 25 G 3/4" x 7"	0.5 x 19mm x 180mm	25/500	●
24225300K	Güvenlikli Kelebek Set + Holder 25 G 3/4" x 12"	0.5 x 19mm x 305mm	25/500	●

VACUSERA HOLDER

Vacusera Holder'lar, Vacusera İğne ve Kan Alma Tüpleri ile tam uyumludur. Vacusera Güvenlikli Holder sağlık çalışanlarını iğne batma riskine karşı maksimum korur.



Ref No	Açıklama	Paket / Koli
260001	Standart Holder	100/2000
260002	Güvenlikli Holder	50/800
260003	Otomatik Holder	100/2000
260005	Luer Lock Kan Alma Holder	200/800
260006K	Luer Adaptör + Standart Holder	200/800

VACUSERA KAN ALMA İĞNESİ + GÜVENLİKLİ HOLDER



Ref No	Açıklama	Paket / Koli
260018K	Kan Alma İğnesi + Güvenlikli Holder 18 G x 1 1/2" (1.2x38mm)	25/500
260020K	Kan Alma İğnesi + Güvenlikli Holder 20 G x 1 1/2" (0.9x38mm)	25/500
260021K	Kan Alma İğnesi + Güvenlikli Holder 21 G x 1 1/2" (0.8x38mm)	25/500
260022K	Kan Alma İğnesi + Güvenlikli Holder 22 G x 1 1/2" (0.7x38mm)	25/500
260023K	Kan Alma İğnesi + Güvenlikli Holder 23 G x 1 1/2" (0.6x38mm)	25/500

VACUSERA MİNİ KAPİLER KAN ALMA SİSTEMLERİ

Vacusera Mini Kapiler Kan Alma Sistemleri, pediatrik kullanımda gerekli tüm ekipmanları sağlar.

VACUSERA MİNİ KAPİLER KAN ALMA TÜPLERİ

Vacusera Mini Kapiler Kan Alma Tüpleri pediatrik kan alımlarında kullanım rahatlığı sağlayan özel kapağı ile sağlık çalışanlarına maksimum konforu sunar.

VACUSERA MİNİ SERUM TÜPLERİ



Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	İçerik	Paket / Koli	Kapak Rengi
238202	VACUSERA MİNİ 0.2 ml Serum	0.2	Pıhtı Aktivatörü	100/1000	●
238205	VACUSERA MİNİ 0.5 ml Serum	0.5	Pıhtı Aktivatörü	100/1000	●
238302	VACUSERA MİNİ 0.2 ml Serum + JEL	0.2	JEL + Pıhtı Aktivatörü	100/1000	●
238305	VACUSERA MİNİ 0.5 ml Serum + JEL	0.5	JEL + Pıhtı Aktivatörü	100/1000	●

VACUSERA MİNİ EDTA'LI TÜPLER



Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	İçerik	Paket / Koli	Kapak Rengi
238602	VACUSERA MİNİ 0.2 ml K2EDTA	0.2	K2E K2EDTA	100/1000	●
238605	VACUSERA MİNİ 0.5 ml K2EDTA	0.5	K2E K2EDTA	100/1000	●
238612	VACUSERA MİNİ 0.2 ml K3EDTA	0.2	K3E K3EDTA	100/1000	●
238615	VACUSERA MİNİ 0.5 ml K3EDTA	0.5	K3E K3EDTA	100/1000	●

VACUSERA MİNİ HEPARİNLİ TÜPLER



Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	İçerik	Paket / Koli	Kapak Rengi
238402	VACUSERA MİNİ 0.2 ml LH/Lityum Heparin	0.2	LH/Lityum Heparin	100/1000	●
238405	VACUSERA MİNİ 0.5 ml LH/Lityum Heparin	0.5	LH/Lityum Heparin	100/1000	●
238412	VACUSERA MİNİ 0.2 ml LH/Lityum Heparin + JEL	0.2	LH/Lityum Heparin + JEL	100/1000	●
238422	VACUSERA MİNİ 0.2 ml NH/Sodyum Heparin	0.2	NH/Sodyum Heparin	100/1000	●

VACUSERA MİNİ K2EDTA VE K3EDTA'LI GLİKOZ TÜPLERİ



Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	İçerik	Paket / Koli	Kapak Rengi
238701	VACUSERA MINI 0.2 ml FE/K2EDTA	0.2	FE/Sodyum Florid + K2EDTA	100/1000	●
238702	VACUSERA MINI 0.2 ml FE/K3EDTA	0.2	FE/Sodyum Florid + K3EDTA	100/1000	●

VACUSERA MİNİ KOAGULASYON TÜPLERİ



Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	İçerik	Paket / Koli	Kapak Rengi
238505	VACUSERA MINI 0.5 ml Koagulasyon %3.2 Sodyum Sitrata	0.5	Sodyum Sitrata	100/1000	●

VACUSERA OTOMATİK LANSET

Vacusera Otomatik Lansetler güvenli numune toplanması için kolay ve tutarlı delme derinliği sağlar.



Reference Number	Description	Draw vol. (mm)	Pack / Carton	Cap Colour
2393018N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 30G / 1.8mm	30G/1.8mm	100/1000	●
2393015N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 30G / 1.5mm	30G/1.5mm	100/1000	●
2392818N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 28G / 1.8mm	28G/1.8mm	100/1000	●
2392815N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 28G / 1.5mm	28G/1.5mm	100/1000	●
2392618N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 26G / 1.8mm	26G/1.8mm	100/1000	●
2392518N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 25G / 1.8mm	25G/1.8mm	100/1000	●
2392322N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 23G / 2.2mm	23G/2.2mm	100/1000	●
2392318N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 23G / 1.8mm	23G/1.8mm	100/1000	●
2392128N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 21G / 2.8mm	21G/2.8mm	100/1000	●
2392122N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 21G / 2.2mm	21G/2.2mm	100/1000	●
2392118N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 21G / 1.8mm	21G/1.8mm	100/1000	●
2392118BN	VACUSERA Güvenlikli Lanset Bıçaklı 21G / 1.8mm	21G/1.8mm	100/1000	●
2391818N	VACUSERA Güvenlikli Lanset 18G / 1.8mm	18G/1.8mm	100/1000	●
2391818BN	VACUSERA Güvenlikli Lanset Bıçaklı 18G / 1.8mm	18G/1.8mm	100/1000	●



VACUSERA SEDİMENTASYON SİSTEMİ

Vacusera Sedimentasyon Tüpleri sodyum sitrat içermektedir. Tüpler sedimentasyon ölçüm hızı için gerekli vakum hacmine ve bu orana uygun antikoagülana sahiptir.

VACUSERA KAPALI SEDİMENTASYON SİSTEMİ

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/ Koli	Kapak Rengi
233903	VACUSERA 1.28 ml ESR Cam Tüp Otomatik Sistem	1.28	8 x 120	4NC Sodyum Sitrat 3.2%	24 ay	KAĞIT	100/1000	●
233902	VACUSERA 1.6 ml ESR Cam Tüp Otomatik Sistem	1.6	9 x 120	4NC Sodyum Sitrat 3.2%	24 ay	KAĞIT	100/1000	●
290030	VACUSERA 30 ESR Cihazı						1/1	
233901	VACUSERA 1.28 ml ve 1.6 ml ESR Sehpa						1/10	

VACUSERA AÇIK SEDİMENTASYON SİSTEMİ

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/ Koli	Kapak Rengi
234902	VACUSERA 2 ml ESR Tüp	2	13 x 75	4NC Sodyum Sitrat 3.2%	12 ay	KAĞIT	100/1200	●
434902	VACUSERA 2 ml ESR Tüp	2	13 x 75	4NC Sodyum Sitrat 3.2%	12 ay	ŞEFFAF	100/1200	●
234900	VACUSERA Tek Kullanımlık Dereceli ESR Pipeti				60 ay		200/2000	
234901	VACUSERA ESR Sehpa 234902 & 434902 için (Vacusera Açık Sedimentasyon Sistemi)						1/25	



VACUSERA İDRAR TOPLAMA SİSTEMLERİ

Vacusera İdrar Toplama Sistemleri, tüplere ilave olarak vakumlu sisteme uygun olan entegre holderlı idrar bardağı ile birlikte kullanıcıya sunulmaktadır.

Ref No	Açıklama	Hacim (ml)	Ebat (mm)	İçerik	Raf Ömrü	Etiket	Paket/Koli	Kapak Rengi
235806	VACUSERA 6 ml İdrar Tüpü	6	13 x 100	Katkısız	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236800	VACUSERA 10 ml İdrar Tüpü	10	16 x 100	Katkısız	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
235816	VACUSERA 6 ml İdrar Tüpü- Borik asit	6	13 x 100	Borik Asit	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236810	VACUSERA 10 ml İdrar Tüpü - Borik asit	10	16 x 100	Borik Asit	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236820	VACUSERA 10 ml İdrar Tüpü - Klorheksidin	10	16 x 100	Klorheksidin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
236828	VACUSERA 8 ml İdrar Tüpü - Klorheksidin	8	16 x 100	Klorheksidin	18 Ay	KAĞIT	100/1200	●
435806	VACUSERA 6 ml İdrar tüpü	6	13 x 100	Katkısız	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436800	VACUSERA 10 ml İdrar tüpü	10	16 x 100	Katkısız	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
435816	VACUSERA 6 ml İdrar Tüpü - Borik asit	6	13 x 100	Borik Asit	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436810	VACUSERA 10 ml İdrar Tüpü - Borik asit	10	16 x 100	Borik Asit	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436820	VACUSERA 10 ml İdrar Tüpü - Klorheksidin	10	16 x 100	Klorheksidin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
436828	VACUSERA 8 ml İdrar Tüpü - Klorheksidin	8	16 x 100	Klorheksidin	18 Ay	ŞEFFAF	100/1200	●
103023	VACUSERA Entegre İdrar Bardağı 100 ml (Nonsteril)						300	
103026	VACUSERA Entegre İdrar Bardağı 100 ml Tek Tek Poşetli (Steril)						300	



VACUSERA KAN TOPLAMA SİSTEMLERİ KAN ALMA SIRASI


HACİM	RENK KODU	TÜP ÇEŞİDİ	AÇIKLAMA	ALT-ÜST SAYISI	SANTRİFUJ HIZI & SÜRESİ
1 ml / 1.8 ml / 2.7 ml 3.6 ml		SODYUM SİTRAT	KOAGULASYON TESTLERİ	3-4	2000-2500g(RCF)10-15 DAKİKA
1 ml / 2 ml / 3 ml 4 ml / 6 ml / 9 ml 10 ml		PIHTI AKTİVATÖRÜ	SERUM TESTLERİ	5-6	1300 g (RCF) 10 DAKİKA
2 ml / 3.5 ml / 5 ml 8 ml		PIHTI AKTİVATÖRÜ + JEL	SERUM TESTLERİ	5-6	2000-3000 g (RCF) 10 -15* DAKİKA
4 ml / 6 ml / 9 ml		LİTYUM HEPARİN SODYUM HEPARİN	PLAZMA TESTLERİ	8-10	1300 g (RCF) 10 DAKİKA
3 ml / 5 ml / 8 ml		LİTYUM HEPARİN + JEL	PLAZMA TESTLERİ	8-10	1300-2000 g (RCF) 10 DAKİKA
1 ml / 2 ml / 3 ml 4 ml / 4.5 ml / 6 ml 9 ml		EDTA	HEMATOLOJİ TESTLERİ	8-10	
3 ml / 5 ml / 8 ml		EDTA + JEL	MOLEKÜLER DİAGNOSTİK TESTLERİ	8-10	1100-1500 g (RCF) 10 DAKİKA
2 ml / 4 ml		FE / SODYUM FLORİD + EDTA	GLİKOZ TESTLERİ	8-10	1300 g (RCF) 10 DAKİKA
2 ml / 4 ml		FX/ SODYUM FLORİD +POTASYUM OKSALAT	GLİKOZ TESTLERİ	8-10	1300 g (RCF) 10 DAKİKA

Yetersiz alınan kan hacmi ve yetersiz karıştırma test sonuçlarını etkileyerek yeniden kan almanıza sebep olabilir.

* Sabit açılı (fixed-angle) rotor kullanıldığında 15 dakika

Tam açılır (swing-out) rotor kullanıldığında 10 dakika

KAN ALMA İŞLEM SIRALAMASI

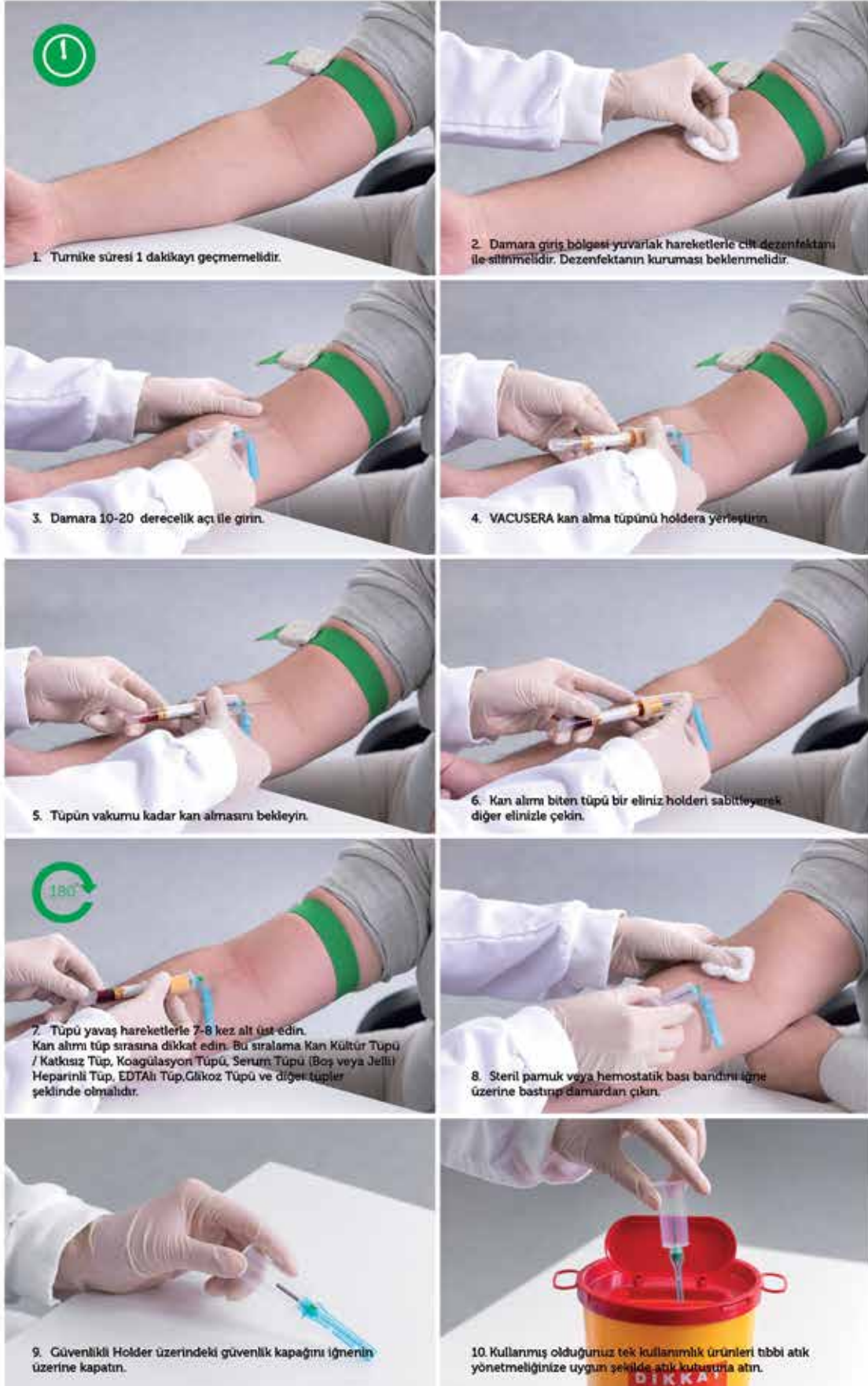

disera
RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS

Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: 5758 Sok. No:4 / H - P.K. 35110 / Karabağlar - İZMİR / TÜRKİYE
Fabrika: İbni Melek O.S.B Mah. Tosbi Yol 5 Sk. No: 46 Tire - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 264 66 68 Faks: +90 (232) 264 84 00
www.disera.com.tr - www.vacusera.com